


# Массажер Универсальный

Руководство пользователя

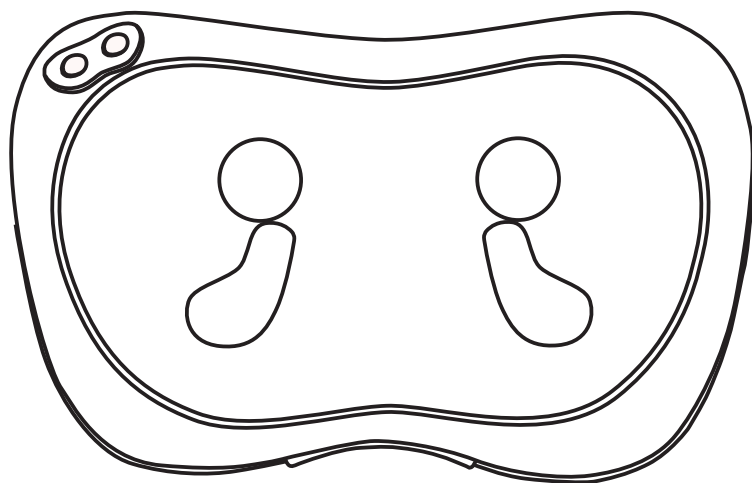

**Массажер Универсальный**  
Руководство пользователя

# СОДЕРЖАНИЕ

Инструкции по безопасности	03
Условия гарантии	05
Массажер и аксессуары	06
Руководство по эксплуатации	07
Обслуживание	09
Устранение неисправностей	10
Технические характеристики	10

# ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

## Среда использования

- Не используйте прибор во влажном помещении или в пыльной среде, поскольку это может приводить к неисправности или поражению электрическим током.
- Не используйте прибор в ванной комнате.
- Не используйте прибор на кровати.
- Не размещайте и не храните прибор там, где он может падать на пол или в воду. Поместите прибор в безопасное место.
- Не садитесь на прибор.
- Не подвергайте прибор внешнему нагреву или воздействию прямого солнечного света.

## Когда продукт не должен использоваться

- Если использование превышает 15 минут за один раз.
- Данное устройство не должно использоваться детьми или инвалидами без надзора со стороны взрослых.
- Не используйте этот продукт перед сном.
- Если покрытие ткани разорвано.
- Если вода случайно попала на прибор.
- Если пользователь чувствует аномальную или сильную боль во время массажа.
- Если пользователь обнаруживает любую неисправность или другие ненормальные условия во время операции.
- Если есть молния (Зарядка).

## Предупреждение

- Отключайте прибор от розетки, когда он не заряжается.
- Не используйте этот прибор, если он имеет поврежденный шнур или вилок. Пожалуйста, верните массажер в Авторизованный сервисный центр розничной торговли для осмотра и ремонта.
- Прибор должен использоваться только с блоком питания, который идет в комплектации.

# Инструкции по технике безопасности

- Не бросайте и не вставляйте какой-либо объект в любое отверстие.
- Обращайтесь с нагретыми поверхностями осторожно. Автоматическое использование нагретых поверхностей детьми или инвалидами могут быть опасными.
- Не поднимайте и не держите это устройство с помощью шнура питания или любого шнура.
- Устройство имеет нагретую поверхность. Лицо, нечувствительное к теплу, должно быть осторожно при использовании прибора.
- Данное устройство предназначено только для личного использования, а не для профессиональных цели.
- Не закрывайте прибор во время работы.
- Не раздавливайте прибор и избегайте резких складок.

## Примечание

- Для обеспечения безопасного и правильного использования массажера сначала внимательно прочитайте это руководство пользователя.
- Массажер не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими или умственными способностями.  
Перед применением необходимо получить инструктаж о его использовании ответственным лицом.
- Интенсивное использование может привести к чрезмерному нагреву и более короткому сроку службы. Дайте устройству остыть перед повторным запуском.
- Для людей, находящихся на лечении или в состоянии обострения, проконсультируйтесь со специалистом перед использованием.  
Пожалуйста, не используйте массажер, если вы плохо себя чувствуете.
- Если устройство хранится в холодном месте и вносится в теплое помещение, подождите один час перед использованием, чтобы получить оптимальный уровень массажа.
- Не открывайте чехол массажера, это может привести к неисправности или поражению электрическим током.
- Не подключайте и не отсоединяйте сетевой шнур от электрической розетки влажными руки.
- Не используйте прибор, если электрическая розетка неисправна.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Чистка или уход не должны производиться детьми без присмотра.



# Условия гарантии

1. Гарантия не подлежит передаче.
2. Настоящая гарантия действует только в том случае, если продукт приобретен у уполномоченного продавца.
3. Для всех гарантийных ремонтов требуется подтверждение покупки (оригинальная квитанция).
4. Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.
5. Повреждение массажера вследствие неправильного использования, неправильного обращения и несанкционированного ремонта не распространяется на настоящую гарантию.
6. Гарантия не распространяется на принадлежности и аксессуары.
7. Гарантия не действует при использовании массажера в коммерческих целях.
8. Все ремонты, охватываемые настоящей гарантией, должны быть одобрены авторизованным розничным торговцем и ремонты должны проводиться только уполномоченными специалистами.
9. Если запасные части для дефектных частей недоступны, авторизованный розничный торговец оставляет за собой право произвести замену массажера вместо ремонта или замены дефективных частей.

# Массажер и аксессуары

- A) Массажер
- B) Блок питания

## Диаграмма

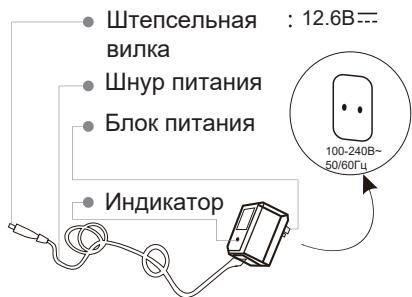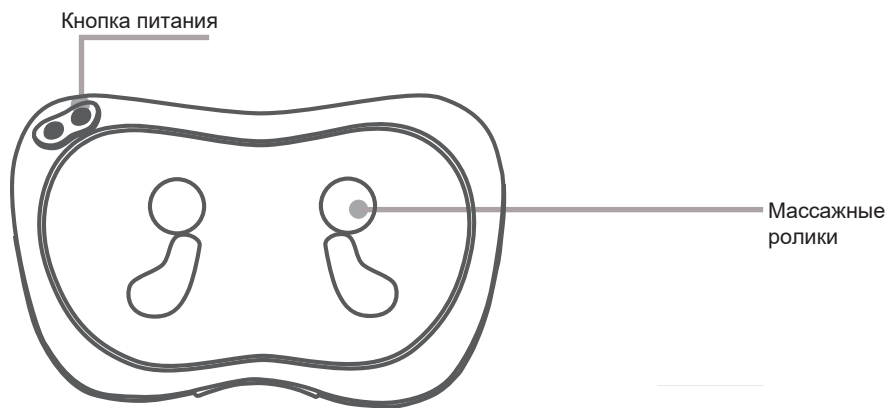

# Руководство по эксплуатации

## Особенности продукта

- Многофункциональный массажер, который можно использовать на каждой части тела, особенно на шее, плече, талии.
- Кнопка реверса вращения 4-х массажных роликов для лучшего расслабления мышц
- Легкий и удобный, портативный.
- Автоматическое отключение через 15 минут.
- Эргономичный дизайн позволяет применять массажер на различные части тела.

## Применение

Поясница



Ноги



Плечи и шея



### а) Подготовка перед использованием

- Проверьте, не поврежден ли массажер
- Поместите массажер на часть тела, которую необходимо массировать.

### б) Использование:

1. Подключите штепсель массажера к адаптеру питания и подключите адаптер к розетке 220В.
2. Заряжайте батарею в течение 2,5 часов и можете использовать в течение 1 часа. При зарядке массажер не может быть использован. Состояние зарядки аккумулятора:
  3. При зарядке свет горит красным светом, Зеленый свет индикатора означает, что батарея заряжена и массажер готов к использованию.



#### 4. Operation method

Использование кнопки с двойной функцией (Вкл. / Выкл.,  
Скорость)



##### **Вкл/Выкл кнопка**

Нажмите кнопку, чтобы запустить режим массажа 1 с включенным нагревом.

Нажмите еще раз, чтобы перейти в режим массажа 2 с включенным нагревом.

Нажмите снова, чтобы выключить нагрев (работает режим массажа 2).

Нажмите еще раз, чтобы выключить массажер.



##### **Кнопка скорости**

По умолчанию (когда продукт включен), работает

«Средняя скорость».

Нажмите один раз, чтобы увеличить скорость до

«Высокая скорость».

Нажмите еще раз, чтобы установить скорость

"Малая скорость"

##### **Таймер**

Массаж закончится через 15 минут. Повторите массаж,

включив кнопку Вкл/Выкл снова. НЕ используйте

массажер более 30 минут, чтобы предотвратить

перегрев продукта.

# ОБСЛУЖИВАНИЕ

## ХРАНЕНИЕ

- Поместите массажер в коробку или в безопасное, сухое и прохладное место. Избегайте контакта с острыми краями или острыми предметами, которые могут порезать или проколоть поверхность.
- Пожалуйста, храните шнур питания и адаптер с массажером.

## УХОД ЗА МАССАЖЕРОМ

- Отключите устройство и дайте ему остыть перед очисткой.
- Чистите только мягкой, слегка влажной губкой.
- Не допускайте попадания воды или другой жидкости внутрь устройства.
- Избегайте использования абразивных чистящих средств, щёток, бензина, керосина, стекла или мебельного лака или растворителя для очистки продукта.
- Не пытайтесь ремонтировать изделие. Для обслуживания обращайтесь к авторизованному продавцу.

## ВНИМАНИЕ

- Избегайте разрыва чехла массажера.
- Для устранения любого риска травмирования следует использовать только легкое давление на массажер.
- Остерегайтесь окрашивания, не используйте массажер на светлого цвета стульях или диванах.

# УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Этот массажер управляется встроенным чипом и подвержен скачкам напряжения от + 10% до -15%. Благодаря этому массажер может отображать следующее:

Состояние	Возможная причина	Решение
Массажер не включается	1. Разряжена батарея	1. Пожалуйста, зарядите батарею. 2. Запустите кнопку Вкл/Выкл.
Массажер внезапно отключился	1. Разряжена батарея. 2. Общее время работы составляет более 15 минут. 3. Прибор используется в течение длительного времени, что приводит к перегреву. 4. Слишком большое давление на массажер.	1. Зарядите батарею. 2. Повторно запустите кнопку Вкл/Выкл. 3. После того, как прибор остынет, запустите кнопку Вкл/Выкл. 4. Повторно запустите кнопку Вкл/Выкл.

## Технические характеристики

Наименование	Массажер универсальный Lotus-Pro
Напряжение адаптера	100-240В~
Частота	50/60Гц
Мощность	12Вт
Напряжение массажера	12.6В = 1А
Таймер	15 минут
Размеры	340*125*220(мм)
Вес	1.3Кг

